

E-FLEX ONE



Una sola lima con eficiencia increíble

Tratamiento Térmico de Azul garantiza mayor flexibilidad y seguridad

● Color de Estándar ISO
Indicar tamaño de punta

Tapón

Cambio de Inclinación
Aumentar gradualmente desde la punta hasta el mango para evitar succión y bloqueo

Ni-Ti con efecto térmico de memoria
Mejora la flexibilidad y la resistencia a la fatiga cíclica para garantizar tratamientos seguros

Indicador de Conicidad


Marca precisa de longitud


Filo de corte agudo
Mejora la eficiencia de corte

Sección transversal de doble S
Eliminación eficiente de residuos

Punta segura sin corte
Reduce formación de escalón y extrusión apical, y minimiza la desviación del conducto

• Protocolo de uso

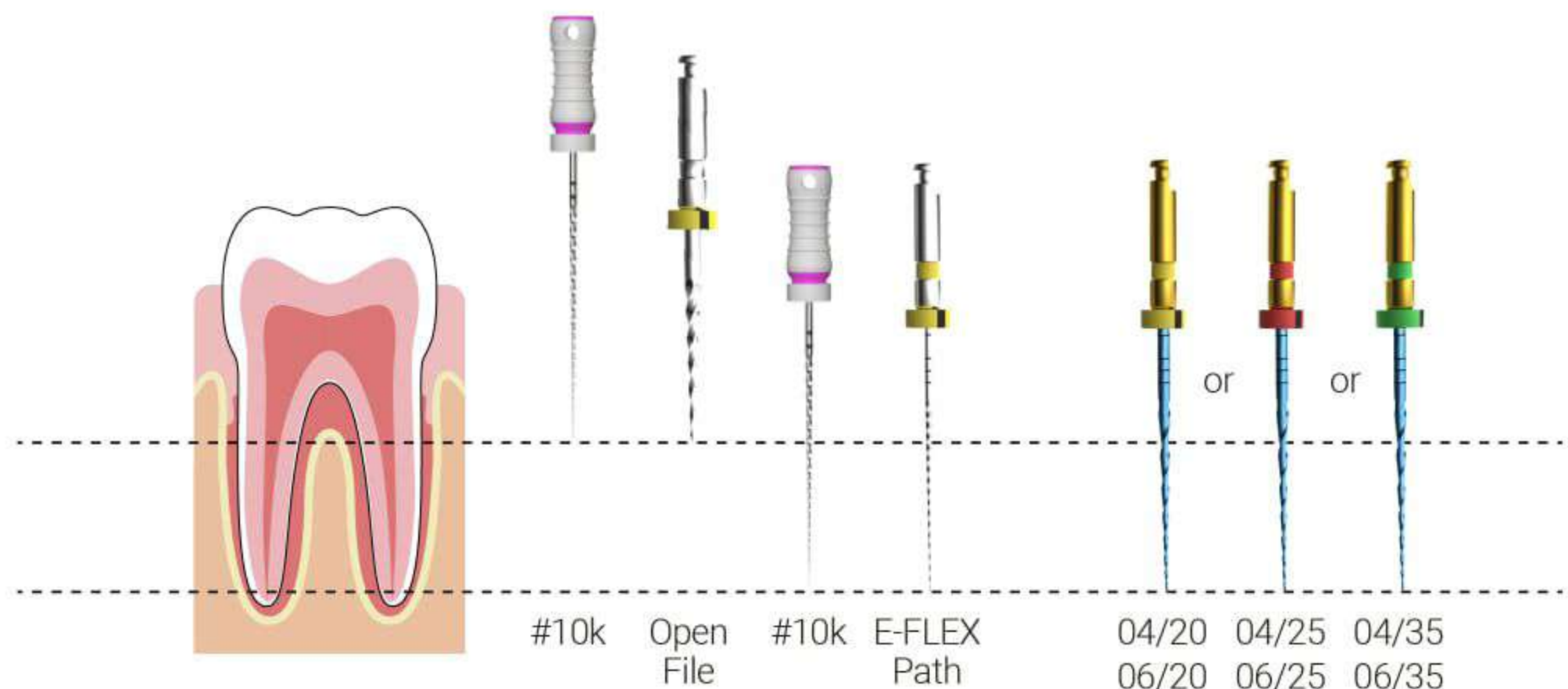

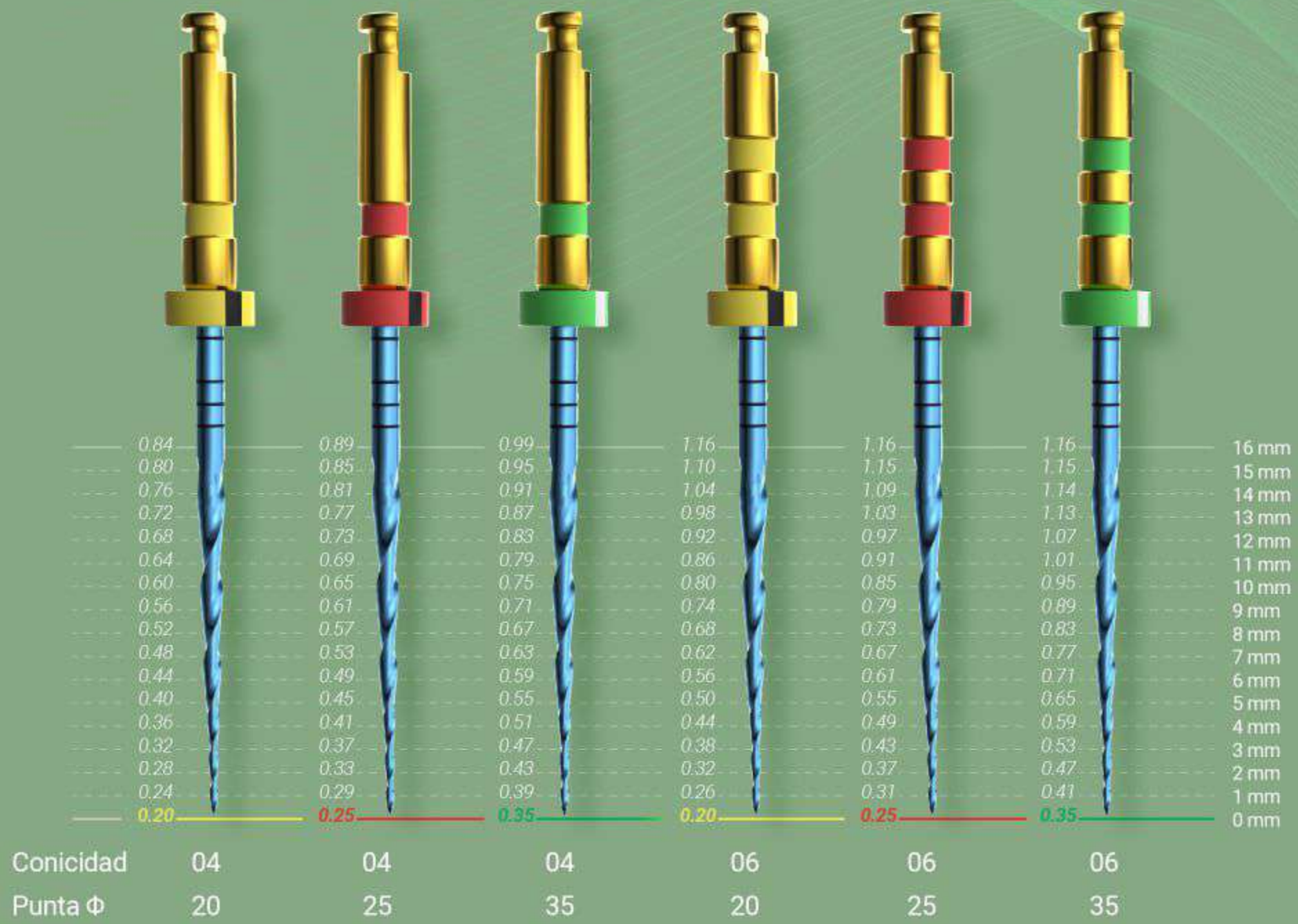

	Color	Tamaño de Punta	Conicidad (%)	Indicador de Conicidad	Sección transversal	Longitud (mm)	Velocidad/ Par Sugerido
E-FLEX ONE		20	4			21/25/31	400 rpm 2 N·cm
		25	4				
		35	4				
		20	6				
		25	6				
		35	6				

